

Экспресс-тест РОСТ на COVID-19

Наборы для экспресс-тестирования на месте (РОСТ) на COVID-19 можно использовать в домашних условиях.

Результаты РОСТ отражают состояние человека на данный момент.

Экспресс-тест РОСТ на COVID-19 наиболее надежен при регулярном выполнении, предпочтительно 2 или 3 раза в неделю. Если у вас есть симптомы COVID-19, вам следует пройти лабораторный ПЦР-тест в Центре диагностики независимо от результата вашего экспресс-теста, заказав его на gnb.ca/gettestedcovid19 или по телефону 811.


ВАШ НАБОР ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ СОДЕРЖИТ:




Ватная палочка для носа



Пробирка

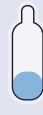

Буферная жидкость

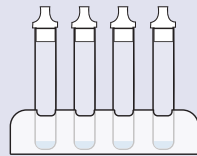

Подставка для пробирки



Картридж с тестом

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

- Чистая, ровная поверхность
- Дезинфицирующее средство для рук
- Таймер или часы

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫ НАЧНЕТЕ

- Перед использованием доведите все материалы для тестирования до комнатной температуры (18-30 °C).
- Вымойте руки
- Очистите свою рабочую поверхность
- Откройте содержимое вашего набора для тестирования. Извлеките тестовый картридж из упаковки
- Напишите свое имя на картридже, если тестируются более одного



Чтобы посмотреть обучающее видео, посетите страницу gnb.ca/pointofcaretesting

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ ВТНХ


ШАГ 1

- Поместите пробирку для анализа в подставку так, чтобы она стояла вертикально.
- Вылейте все содержимое одного одноразового буферного раствора для тестирования в пробирку.




ШАГ 2

- Введите палочку в ноздрю примерно на 2 см.
- Потрите палочку о внутреннюю поверхность ноздри и вращайте ее в ноздре 10 раз, затем повторите в другой ноздре.

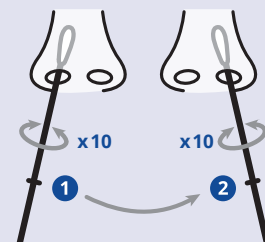


ШАГ 3

- Погрузите наконечник палочки в жидкость в пробирке, вращая его и перемешивая им жидкость в течение 10 секунд.
- Выжмите палочку 10-15 раз, прижимая ее к стенке пробирки.
- Держите палочку погруженной в жидкость и дайте ей постоять в течение 2 минут в подставке для пробирки.

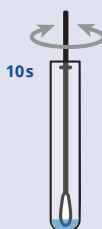

ШАГ 4


- Извлеките палочку из пробирки, одновременно отжимая ее кончик.
- Прикрепите насадку к пробирке и осторожно выдавите 3 капли в круглое отверстие картриджа для теста.

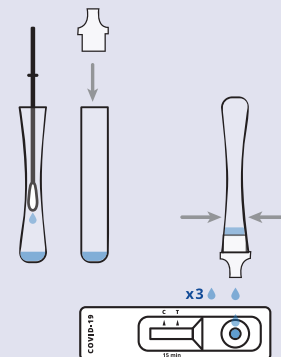

ШАГ 5


- Установите таймер на 15 минут. Через 15 минут в окошке результата появится цветная линия.
- Когда закончите, должным образом утилизируйте принадлежности для тестирования, протрите руки и очистите место тестирования.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

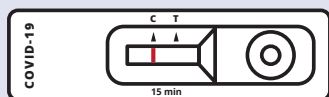

Одна полоска на отметке «С», а полоски на отметке «Т» отсутствуют. Отчетность не требуется, продолжайте тестироваться по своему графику.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

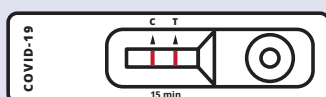

Две полоски: одна на отметке «С», другая на отметке «Т». Вы должны немедленно самоизолироваться. Чтобы назначить проведение подтверждающего тестирования, перейдите по ссылке gnb.ca/gettestedcovid19 или позвоните по телефону 811.

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Если результат вашего теста не соответствует ни ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ, ни ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ примерам, возможно, тест не сработал. Повторяйте тест до тех пор, пока не получите положительный или отрицательный результат.

Если результат вашего экспресс-теста (РОСТ) был ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ, пожалуйста, изолируйтесь и закажите ПЦР-тест онлайн на gnb.ca/gettestedcovid19 или по телефону 811.